


EVANS TEST SKRZYDŁEM MADDOXA



*Szybki i skuteczny test do bliży
do wykrywania heteroforii...*

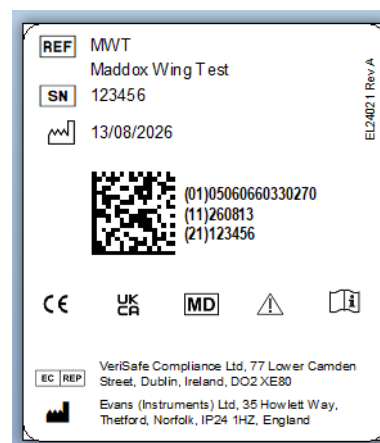

(przykładowa etykieta)

Model / GS1-GTIN:	MWT /	5060660330270
Wymiary (cm):	Bez opakowania	W opakowaniu (ok.)
Wysokość:	31	33
Podstawa (szer./dł.):	15,5/13	19/29
Masa (g):	300	900

Instrukcja użycia

To solidnie wykonane urządzenie umożliwia szybkie wykrycie obecności heteroforii (ukrytego zezła) w widzeniu do bliży oraz pomiar jej wielkości w dioptriach pryzmatycznych na skali poziomej i pionowej.

Procedura

Pacjent opiera część twarzową na nosie i patrzy przez dwa otwory. Górne ukośne skrzydełko dzieli pole widzenia na dwie części, tak że lewe oko widzi skalę, w kierunku której wskazuje biała strzałka, a prawe oko widzi strzałkę. Charakter i stopień odchylenia można następnie natychmiast określić na podstawie pozornej pozycji strzałki na skali.

Pionowa przesłona zasłania czerwoną strzałkę przed lewym okiem oraz czerwoną skalę pionową przed prawym okiem, dzięki czemu każde odchylenie pionowe można szybko wykryć i zmierzyć na podstawie pozornej pozycji czerwonej strzałki na skali pionowej.

W przypadku występowania cykloforii można ją zmierzyć, regulując ruchomą gumkę tworzącą trzon czerwonej strzałki, aż do momentu, gdy pacjent będzie postrzegał ją jako równoległą do skali poziomej.

Podczas wykonywania testu skrzydełkowego Maddoxa urządzenie należy skierować w dół, tak aby oczy znajdowały się w pozycji podobnej do przyjmowanej podczas widzenia do bliży (czytania), w normalnych warunkach codziennego użytkowania.

Instrukcja czyszczenia



Urządzenie można czyścić, przecierając je wilgotną ściereczką i słabym roztworem detergentu/środka dezynfekującego. Należy pamiętać, że NIE WOLNO stosować środków czyszczących na bazie alkoholu.

Utylizacja

Urządzenie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Instrukcja oryginalna. Data wydania: 13.08.2026

Symbole



Uwaga.



Wyrób medyczny.



Zapoznać się z instrukcją użycia.



Numer seryjny urządzenia.




Data produkcji.



Numer katalogowy.



Dane producenta.

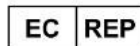

Upoważniony przedstawiciel w Unii Europejskiej.



Znak CE na tym produkcie wskazuje, że produkt został przebadany i jest zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.



Znak UKCA na tym produkcie wskazuje, że produkt został przebadany i jest zgodny z wymaganiami brytyjskich przepisów dotyczących wyrobów medycznych z 2002 r. (z późniejszymi zmianami).

Gwarancja

Jeżeli produkt stanie się wadliwy z powodu wad materiałowych lub jakości wykonania w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, gwarantujemy wymianę wszystkich wadliwych części lub, według naszego uznania, bezpłatną wymianę całego urządzenia, pod warunkiem że:

- Produkt zostanie zwrócony do nas lub do autoryzowanego serwisu wraz z dowodem daty zakupu;
- Produkt nie był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem ani zaniedbywany;
- Produkt nie został uszkodzony przez ciała obce, substancje ani skutek wypadku;
- Naprawy nie były podejmowane przez osoby inne niż pracownicy naszego serwisu lub autoryzowani dystrybutorzy serwisowi.

Niniejsza gwarancja stanowi dodatkowe świadczenie i nie ogranicza ustawowych praw klienta.

Warunki użytkowania

- Niniejszy przyrząd jest przeznaczony do stosowania w profesjonalnym gabinecie optycznym/klinice.
- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń – chronić przed wilgocią.

Oświadczenie dotyczące poważnych incydentów

Wszelkie poważne incydenty związane z tym produktem należy niezwłocznie zgłaszać firmie Evans (Instruments) Limited, a także właściwemu organowi w danym kraju (w Wielkiej Brytanii jest to MHRA).



Evans (Instruments) Limited: 35 Howlett Way, Thetford, Norfolk, IP24 1HZ, England



VeriSafe Compliance Limited: 77 Lower Camden Street, Dublin, Ireland, D02 XE80